

Quand l'esthétique et le médical ne font qu'

- Alléger les points de pressions
- Lutter contre les infections nosocomiales
- Remplacer aisément les modules de couette
- Permettre l'accès aux soins
- Pouvoir modifier et/ou adapter les dimensions du fauteuil
- Entretenir l'autonomie du patient


La combinaison d'une riche expérience et d'une maîtrise des matériaux est à l'origine de cette réflexion qui nous permet de proposer, avec une vision globale esthétique & médicale, une nouvelle génération de fauteuil releveur..

8 raisons de choisir un COCOON

1 ALLÉGER LES POINTS DE PRESSIONS et diminuer des risques patients liés aux immobilités quotidiennes et/ou prolongées



Allègement des points de pression par immersion dans la couette de la totalité du corps du patient. La combinaison couette sur assise hamac en sangle élastiquée évite tout risque de talonnement. L'association de ces techniques est à l'origine d'une très bonne congruence. Conception similaire aux propositions existantes de surmatelas / coussins constitués de fibres creuses siliconées. Produit recommandé pour les grands douloureux comme le démontrent les visuels.

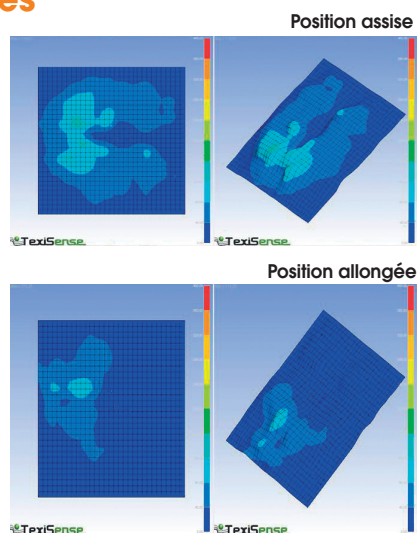

Échelle en mm de mercure
NB : 120 mm de pression en position assise, correspond à une efficacité proche du Classe II

2 LUTTER CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Modules de couette amovibles et lavables en machine à 30 degrés, possibilités de laver en profondeur les 4 housses avec ou sans les poches de fibres creuses siliconées.

Accoudoirs (G/D) amovibles permettant un nettoyage aisé de l'assise du Cocoon.



3 REMPLACER AISÉMENT DES MODULES DE COUETTE usagés ou détériorés (Possibilité de remise en état à coûts réduits)

A tout moment, il est possible de racheter des éléments de couette (housses et/ou garnitures) et de les repositionner soi-même sur le Cocoon.



Couette accoudoir amovible et remplaçable

Couette dossier amovible et remplaçable

Couette accoudoir amovible et remplaçable

Couette assise/repose jambes amovible et remplaçable

4

PERMETTRE L'ACCÈS AUX SOINS

Accoudoirs amovibles et escamotables latéralement permettant l'accès aux pansements et l'accès aux changes.

Ceux-ci permettent également la mise en place de sangles de lève patient, et **favorisent les possibilités de transfert.**



5

POUVOIR MODIFIER ET/OU ADAPTER LES DIMENSIONS du Cocoon à l'utilisateur.



Quatre combinaisons dimensionnelles disponibles :

Deux largeurs : • 44 cm
• 50 cm

Deux profondeurs d'assise : • 45 cm
• 55 cm

6

ENTREtenir L'AUTONOMIE DU PATIENT grâce à une cinématique évitant tout risque de stress

L'aide au transfert debout (électrique) se fait en deux temps : le fauteuil s'élève puis dans un second temps bascule en avant. Cette fonction « aide au lever » qui permet de se relever sans effort peut être utilisée par le patient ou par l'aidant.

Sécurité patient

La fonction **Stop & Start** permet de trouver automatiquement la position assise.. Le patient doit appuyer à nouveau sur la télécommande pour se relever sans effort.



7

POUVOIR FAIRE ÉVOLUER LE COCOON en cas d'évolution pathologique du patient

- Kit Mobilité : Déplacement rapide et sans effort du Cocoon (sans le patient).
- Kit Accès soulève patient : Surélévation du fauteuil (+12 cm) pour en permettre l'accès.








8

RESPECTER LES NORMES, la Conformité et la réglementation en collectivité

- Revêtement polyuréthane PU conforme aux Normes Feu M1 (coloris Taupe ou Chocolat)
- Revêtement simili cuir conforme aux Normes Feu M2
- Norme CEM/EMF (Marquage CE)
EN 55014-1 EN55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 62233 Rapport Essai COFRAC

- Vérin électrique garanti 5 ans
- Mécanique garantie 2 ans avec possibilité d'extension à 3 ans
- Poids maximum : 130 kg
- Fauteuil enregistré sur CERAHEC fiche N°14686 et référence NF EN ISO 9999 alinéa 18.09.15
possibilité de prise en charge MDPH

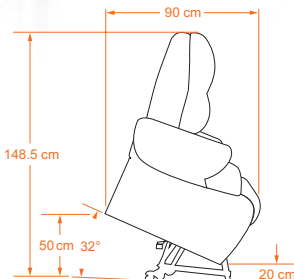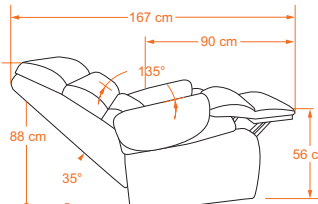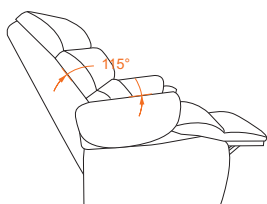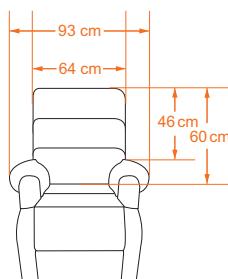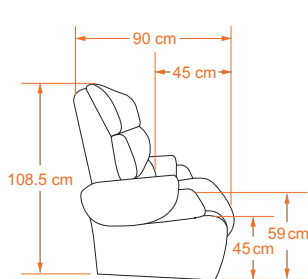

Découvrez notre gamme de fauteuils sur notre site www.innov-sa.com